

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



HANSUN™ 韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Благодарим Вас за покупку массажера для головы Hansun. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием. Уделяйте большое внимание мерам безопасности, чтобы избежать травмы или поломки массажера.

Пожалуйста, сохраняйте данное руководство, чтобы всегда иметь его под рукой в случае необходимости.

▶ Содержание

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ-----	1
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ-----	3
Структура оборудования-----	3
Пульт управления -----	3
МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ-----	4
Подготовка к использованию-----	4
Режимы массажа-----	5
После использования-----	6
ПОРЯДОК ЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ-----	7
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ-----	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-----	9

▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Массажер для головы

Модель: FC8516A

Напряжение питания: 5 В DC

Мощность: 5 Вт

Адаптер питания: AC 100-240V DC 5V 1000mA

Безопасность:

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ

№.	Проблема	Возможная причина	Решение
1	В массажере слышен звук трения.	Это нормально, когда массажер работает и при этом слышен звук трения головы о ткань покрытия.	Это нормально и не требует ремонта.
2	Массажер для головы не включается.	Адаптер питания отключен.	Вставьте вилку в розетку.
		Выключатель питания не включен.	Включите выключатель питания.
		Элементы питания разряжены.	Установите новые батарейки.
3	Отсутствует звук.	Наушники по-прежнему в гнезде для наушников.	Вытащите наушники.
		Проверьте включена ли громкость.	Увеличьте громкость.

Если после вышеуказанных мер, проблемы не были устранены, пожалуйста, для ремонта и технического обслуживания свяжитесь с сервисным центром.

Примечание



Пожалуйста, не разбирайте самостоятельно массажер и храните его согласно инструкции, в противном случае наша компания не несет ответственности за любые проблемы или повреждения, вызванные неправильным обслуживанием!



Спасибо за сотрудничество.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




Меры безопасности

- ▶ Перед использованием массажера, ознакомьтесь с мерами безопасности, чтобы гарантировать правильную работу оборудования и избежать травм.
- ▶ Соблюдение мер безопасности поможет Вам правильно использовать этот массажер.
- ▶ Степень опасности и возможность нанесения ущерба, вызванные некорректным использованием массажера, классифицируются как "ВНИМАНИЕ" и "ОСТОРОЖНО". Каждый пользователь должен это учитывать.

	ВНИМАНИЕ	Указывает пользователю, что он может серьезно пострадать при неправильном использовании массажера.
	ОСТОРОЖНО	Указывает, что при неправильном использовании массажера, может пострадать пользователь или возникнуть поломка.



	Символ "⊘" указывает на запрет того или иного действия. Подробное описание, Вы найдете далее. (Например: этот символ слева, указывает на запрет разборки массажера.)
	Символ "●" указывает на неукоснительное соблюдение предписанных требований. Подробное описание, Вы найдете далее. (Например: этот символ указывает на то, что нужно вытащить вилку из розетки)

ВНИМАНИЕ

	ОБЯЗАТЕЛЬНО	Следующие люди должны проконсультироваться с врачом перед применением массажера: <ol style="list-style-type: none"> 1. Люди, со встроенными электронными медицинскими имплантатами, например, кардиостимуляторами и др. 2. Люди, проходящие курс лечения и плохо себя чувствующие. 3. Люди с онкологическими заболеваниями, с заболеваниями сердца, с острыми болями или серьезными воспалительными процессами. 4. Люди с заболеваниями головы или с нарушением кровообращения. 5. Беременные или женщины во время менструации. 6. Люди с остеопорозом или переломом позвоночника. 7. Люди, с высокой температурой, выше 38°C (Фебрильная фаза).
	ЗАПРЕЩЕНО	Детям или лицам с проблемами реального восприятия, запрещается использовать этот массажер для головы без присмотра. Не позволяйте детям играть с массажером. Массажер может использоваться одним человеком одновременно. Не используйте массажер, если сломан адаптер. (Используйте батареи) Не тяните, не сгибайте, не допускайте повреждений шнура питания. Людям, которые недавно перенесли операцию на глазах или на голове, следует воздержаться от использования данного массажера.
	НЕ РАЗБИРАТЬ	Никто другой, кроме квалифицированного персонала авторизованного нашей компанией, не должен разбирать или ремонтировать массажер. Если у Вас возникли проблемы, свяжитесь с сервисной службой.

▶ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО

 ОБЯЗАТЕЛЬНО	Не используйте массажер без перерыва, более 15 минут.
	Не применяйте массажер в условиях высокой температуры и влажности.
	Пожалуйста, избегайте контакта массажера с водой, чтобы избежать неисправности или поражения электрическим током.
	Во время использования, пожалуйста, не накрывайте массажер одеялом или подушкой, так как чрезмерный нагрев может привести к травме и даже стать причиной пожара.
	Используйте щелочные батареи для оптимальной производительности.
	Пожалуйста, не трогайте пульт мокрыми руками и не кладите на него тяжелые предметы.
	Пожалуйста, не используйте массажер головы лежа.
	Если массажер для головы с холода попадает в теплое помещение, воздержитесь использовать его сразу. Конденсация влаги может привести к неисправности. Рекомендуется использовать этот массажер спустя час после того, как он попадет в помещении с нормальной температурой.
	Не используйте массажер вместе с другими терапевтическим приборами.
	Не используйте массажер во время прогулок и при вождении автомобиля.
	Пожалуйста, не используйте этот массажер как средство лечения.
	Массажер предназначен для домашнего, некоммерческого использования.
	Прекратите использовать массажер, если почувствовали дискомфорт.
 ЗАПРЕЩЕНО	Пожалуйста, следите, чтобы температура в помещении, во время использования массажера, резко не изменялась. (Используйте массажер в помещении с нормальной стандартной температурой).
	Массажер имеет функцию нагрева, и пользователи, нечувствительные к высоким температурам, должны крайне осторожно его применять.
	Если во время использования, Вы почувствовали себя плохо, немедленно прекратите использовать этот массажер и проконсультируйтесь с врачом.
	Пожалуйста, используйте "AA" батарейки и обязательно вынимайте их, если не используете массажер в течение длительного времени.
	Пожалуйста, не используйте этот массажер для головы сразу после еды.
	Пожалуйста, не засыпайте с этим массажером.
	Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
	Пожалуйста, перед использованием, отрегулируйте громкость звука, так как высокая громкость может привести к проблемам со слухом.
Пожалуйста, не чистите массажер для головы бензином или другими растворителями. Следите, чтоб рядом с ним не распылялись аэрозоли.	
Пожалуйста, не ставьте массажер вблизи горючих объектов.	
Пожалуйста, не курите во время использования массажера.	

▶ ПОРЯДОК ЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ

Чистка

- ▶ Перед чисткой, пожалуйста, убедитесь, что питание массажера выключено, адаптер обесточен, и батарейки удалены из пульта управления.
- ▶ Пожалуйста, используйте сухую ткань для чистки поверхности массажера.

Внимание

- ▶ Перед чисткой, пожалуйста, не забудьте выключить питание.
- ▶ Не используйте едкие чистящие средства, такие как бензол или растворители для чистки массажера головы, в противном случае, возникнут проблемы с покрытием массажера: исчезнет окраска, произойдет деструкция материала.
- ▶ Не гладьте утюгом ткань покрытия.

Методы хранения

- ▶ После чистки, если массажер не планируется использовать, в течение длительного периода времени, пожалуйста, накройте его пылезащитным чехлом (сплошным).

Важные напоминания

Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверяйте следующее:

- ▶ Исходит ли от массажера запах гари;
- ▶ При нажатии на кнопку питания, массажер иногда включается, а иногда - нет.
- ▶ Массажер или шнура питания сильно нагревается;
- ▶ Другие неисправности или нехарактерные звуки.

Предупреждение

- ▶ Если присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем, пожалуйста, прекратите использование массажера;
- ▶ Отключите электропитание, отсоедините адаптер и обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисный центр. Для нормального функционирования массажера, любое техническое или другое обслуживание должно быть произведено только в авторизованном сервисном центре.

Внимание

- ▶ При выполнении техобслуживания, убедитесь, что отключен адаптер питания; Во избежание поражения электрическим током, не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками; пользователям запрещено самостоятельно разбирать массажер и проводить ремонт. Пожалуйста, в случае возникших проблем, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

▶ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Как использовать и загрузить музыку

- ▶ Этот режим запускается при включении массажера и может изменяться значком "✓" в музыкальном разделе. При достижении раздела значок "✓" начинает мигать в строке выбора музыки. Теперь Вы можете нажать кнопку "⊖" в течение нескольких секунд, чтобы остановить музыку. Вы также можете нажать кнопку "⊖" в течение секунды, чтобы возобновить прослушивание музыки. В этот момент нажмите "◀" или "▶", чтобы выбрать предпочтительную мелодию.
- ▶ Подключите компьютер к массажеру по USB проводу. Ваш компьютер автоматически распознает карту памяти при нажатии на кнопку питания (кнопка питания "⊖"), чтобы включить массажер. Затем Вы можете скопировать или удалить музыку.
Примечание:
 1. Пожалуйста, убедитесь, что карта памяти правильно вставлена в слот.
 2. Этот массажер поддерживает только формат MP3 музыкальных файлов.

Установка времени

- На массажере можно менять время сеанса в интервале: 5 минут, 10 минут и 15 минут.
- ▶ Нажимайте кнопку "⊖", чтобы выбрать нужный временной интервал для массажа. Выбранный интервал времени появится на дисплее пульта управления (иконка выбранного значения времени станет светлее).

Выбор ручного режима

- ▶ Нажмите кнопку "⊖", чтобы выбрать ручной режим массажа.

⚠ Осторожно

- ▶ Пожалуйста, не используйте массажер более 15 минут одновременно.

После использования

- ▶ Чтобы обесточить аппарат после использования, пожалуйста, нажмите кнопку "⊖" на пульте управления; Если массажер не используется, отключите адаптер питания и извлеките вилку из розетки.


Также рекомендуется вынуть батарейки из отсека пульта управления.

▶ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Состав массажера



Пульт управления

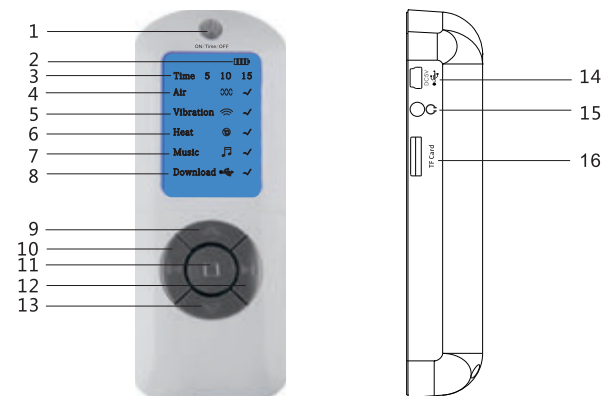

1. Кнопка питания (нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы вкл / выкл питание, короткое нажатие устанавливает время)
2. Индикатор уровня заряда батареи
3. Индикатор времени (5 минут, 10 минут, 15 минут)
4. Индикатор компрессионного массажа
5. Индикатор вибрационного массажа
6. Индикатор прогрева
7. Индикатор проигрывания MP3
8. Индикатор MP3 загрузки
9. Кнопка выбора вверх
10. Кнопка регулировки музыки
11. Кнопка выбора режима
12. Та же функция, что 10
13. Кнопка выбора вниз
14. Разъем питания и Mp3 интерфейса
15. Наушники
16. Слот для карт памяти

▶ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка к использованию

- ▶ Пожалуйста, убедитесь, что массажер подключен к питанию, если Вы не можете его включить.
- ▶ Пожалуйста, используйте массажер после зарядки. Он также поддерживает работу во время зарядки.
- ▶ Пожалуйста, убедитесь, что отключили массажер от сети, если Вы не используете его в течение длительного времени.
- ▶ Массажер должен заряжаться в течение короткого времени. Длительная зарядка может стать причиной сокращения срока службы массажера.

Использование Массажера Для Головы

- ▶ Наденьте массажер на голову, чтобы его передняя часть закрывала Ваши глаза, как показано на рисунке ниже:



- ▶ С помощью настроечных головок по бокам и сверху массажера можно отрегулировать его размер; соответствующие деления на головках помогают пользователю регулировать габариты массажера и изменять его размер.
- ▶ После настройки размера, чтобы начать массаж, нажмите кнопку питания "⏻".

Осторожно

- ▶ Пожалуйста, снимите очки, так как это может вызвать дискомфорт во время использования массажера для головы.
- ▶ Не садитесь и не наступайте на массажер.
- ▶ Не роняйте массажер на землю.
- ▶ Не трогайте массажер мокрыми руками.


Включение массажера для головы

- ▶ Нажмите кнопку "⏻", чтобы включить массажер для головы.
- ▶ Массажер для головы включится и будет готов для выбора программы массажа.
- ▶ Нажатие (нажать и удерживать) кнопки "⏻", приведет к выключению массажера для головы.

▶ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Автоматические режимы массажа

Для выбора автоматического режима массажа, нажмите кнопку "⊕". Переключение режимов проходит между 6 различными режимами автоматического массажа:

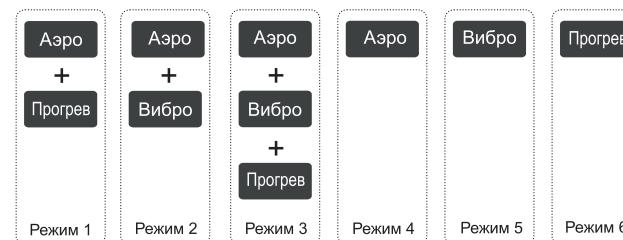


Отдельные режимы массажа

Режимы воздушно-компрессионного массажа

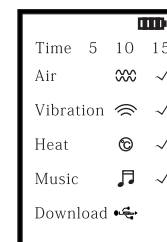


Перемещая кнопками вверх или вниз, выберите режим компрессии, символ "✓" начнет мигать. Это означает, что Вы можете использовать кнопки влево и вправо, чтобы настроить четыре режима компрессии.

Вибрационный массаж

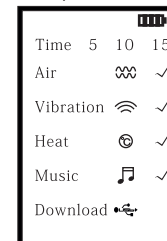

Перемещая кнопками вверх или вниз, выберите режим вибрации, символ "✓" начнет мигать. Это означает, что Вы можете использовать кнопки влево и вправо, чтобы настроить десять режимов вибрации.

Тепловая терапия

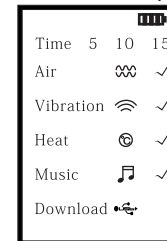

Перемещая кнопками вверх или вниз, выберите режим прогрева, символ "✓" начнет мигать. Это означает, что Вы можете использовать кнопки влево и вправо, чтобы настроить два режима прогрева (38°C и 42°C).