




MeWork

Офисное массажное кресло

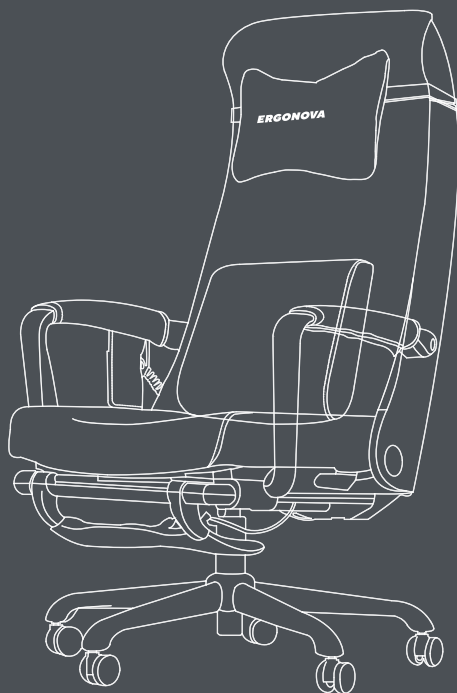

Руководство пользователя



ERGONOVA

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova MeWork!
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться креслом как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova — немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova — надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	5
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

Меры предосторожности

Данное изделие полностью безопасно в использовании.

Однако неисправности устройства могут привести к несчастным случаям. Пожалуйста, перед использованием кресла внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности.

Предупредительные знаки	Значение
-------------------------	----------



Осторожно!



Запрещается



Следуйте инструкции

Меры предосторожности

В следующих ситуациях немедленно прекратите использование массажного кресла.

- Внутрь попала вода или посторонние предметы
- Кабель поврежден или порвался
- Устройство было повреждено в результате падения

В подобных ситуациях следуйте следующим инструкциям:

- ① Во время работы немедленно нажмите кнопку аварийной
- ② Отсоедините кабель питания от розетки
- ③ Обратитесь в службу поддержки клиентов для дальнейшего ремонта.



Примечание

- Продолжение использования может привести к возгоранию или травмам
- Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно



Используйте блоки питания из комплекта поставки



Перед использованием проверьте обивку кресла на наличие повреждений. При обнаружении неисправностей обратитесь в магазин покупки или к производителю



Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку



После длительного хранения проверьте изделие на наличие повреждений



Прежде чем перемещать стул проверьте, что вилка отсоединена от розетки



Не позволяйте детям играть с изделием



Резко не вставайте и не спрыгивайте с кресла



Не применяйте чрезмерную силу при перемещении изделия



Не используйте спирт и абразивные моющие средства для ухода за изделием



Отключите питание перед тем, как обслуживать изделие



Если изделие не используется длительное время, отключите питание



Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие




Не используйте массажер, когда ваше тело мокрое



Не прикасайтесь к вилке и пульту мокрыми руками


Наименования деталей

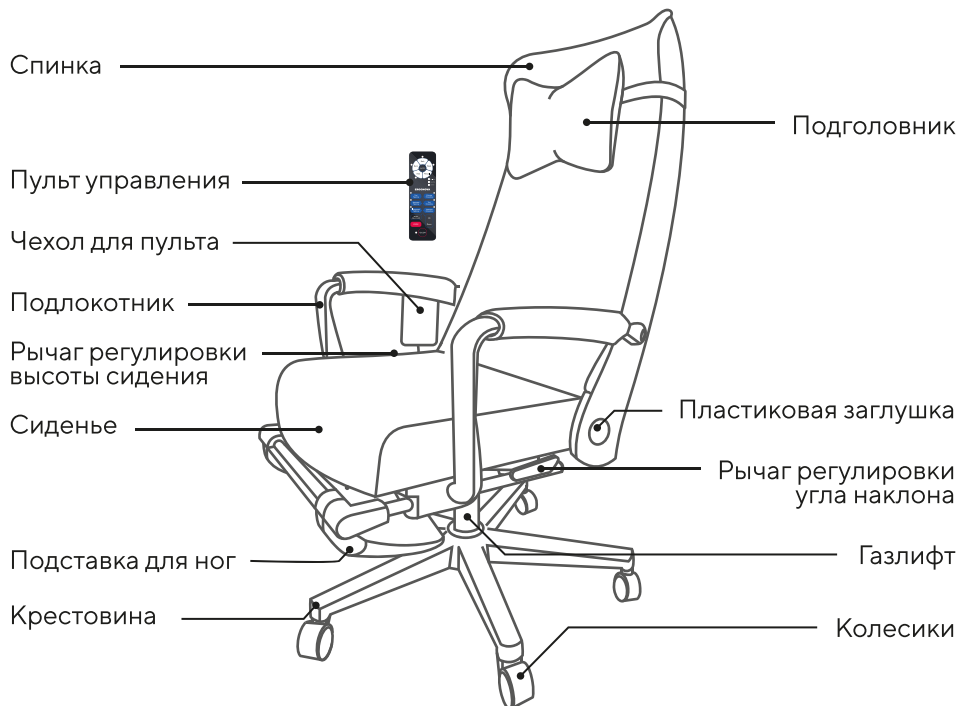

Вид сзади



Кабель питания

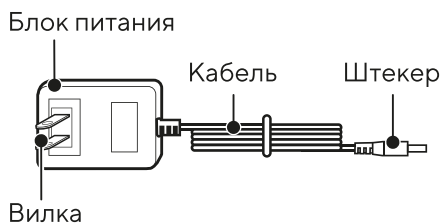

⚠ Примечание

Пожалуйста, используйте блок питания из комплекта поставки

Пульт управления

Массаж спины

Доступны все техники постукивания и разминания

Доступно изменение вертикального положения роликов

Массаж шеи

Доступные техники:
Thai Kneading,
Japanese Kneading,
Chinese Kneading

Подогрев

Нажмите, чтобы
включить подогрев

Постукивания: Тайская техника

Высокая интенсивность

Постукивания: Японская техника

Низкая интенсивность

Постукивания: Комплексная техника

Чередование низкой
и высокой интенсивностей

Регулировка ширины работы роликов

Работает только
в режимах постукивания
(Tapping)

Аварийная остановка массажа

Спина

Шея

Поясница

Прогрев

Ручной

Вся спина

Верх спины

Низ спины

ERGONOVA

Постукивания

Разминание

Тайский массаж

Китайский массаж

Японский массаж

Тайский массаж

Комплексный массаж

Японский массаж

Регулировка ширины

Вверх

Вниз

СТОП

Вкл/Выкл

Массаж поясницы

Доступны все техники
постукивания и разминания

Автоматический выбор
режима массажа

Ручной выбор
режима массажа

Разминание:
Китайская техника
Непрерывное
разминание

Разминание:
Тайская техника
Интервальное
разминание
с короткими паузами

Разминание:
Японская техника
Интервальное
разминание
с длинными паузами

Регулировка вертикального
положения роликов



Работает только
в режимах разминания
(Kneading)

Включение/Выключение массажа

Эксплуатация


Регулировка угла наклона кресла

Сядьте в кресло. Потяните левый рычаг и отклонитесь на спинку
Угол наклона спинки кресла регулируется в диапазоне 106-137 градусов
Опустите рычаг, чтобы зафиксировать спинку под нужным углом

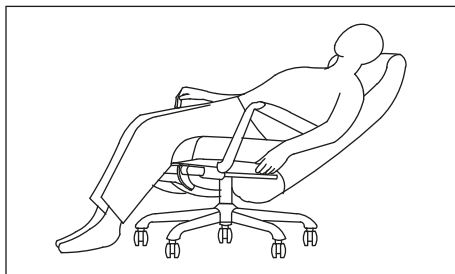
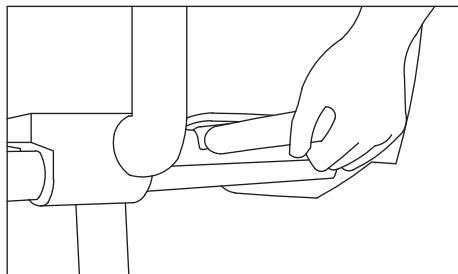


Регулировка высоты сиденья

Сядьте в кресло. Потяните правый рычаг, чтобы поднять или опустить сиденье
Опустите рычаг, чтобы зафиксировать сиденье на нужной высоте

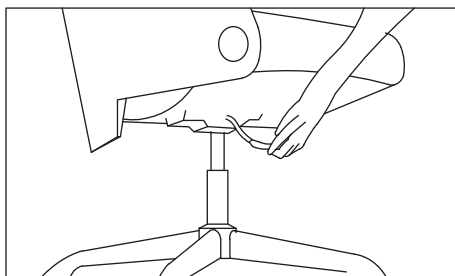






Установка подголовника и расположение пульта

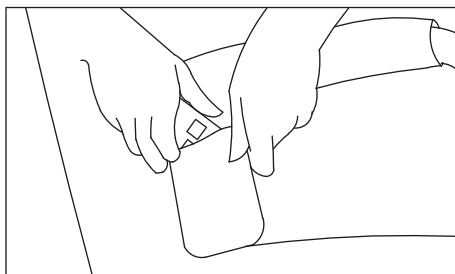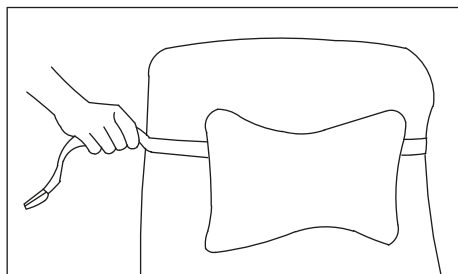

Использование подставки для ног

Потяните за штангу под сиденьем до упора, а затем переверните подставку для ног (рис. 1-2)

После использования (рис. 3) сложите подставку для стоп и задвиньте телескопическую штангу до упора (рис. 4-5)

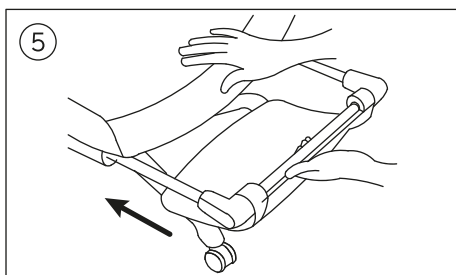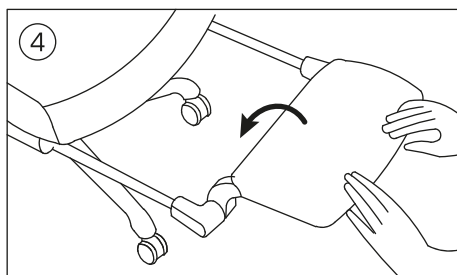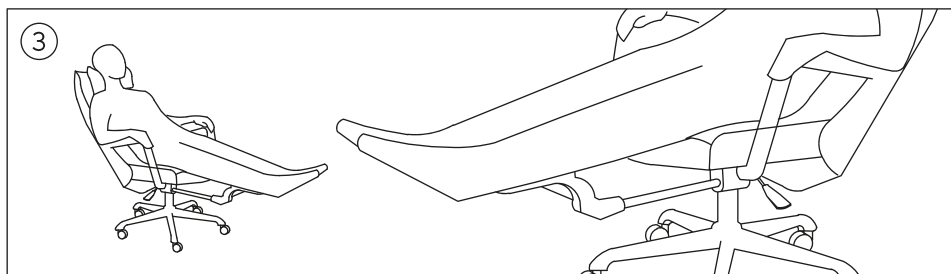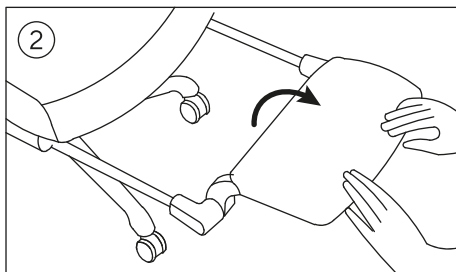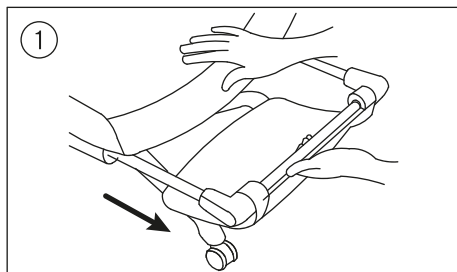

Bluetooth-модуль и динамик

Стул оснащен встроенным модулем Bluetooth. После включения массажа вы услышите характерный звук

Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключитесь к массажеру. Имя устройства [AIM-261]. После успешного подключения можно воспроизводить музыку через динамик стула

Устранение неисправностей

Ознакомьтесь со следующими советами и возможными решениями, если во время использования массажера возникнут проблемы.

Если проблему невозможно устранить, обратитесь в магазин покупки или к производителю

Неисправность	Возможная причина	Решение
Посторонние звуки	Звук, издаваемый изделием при нормальной работе Звук трения между массажным роликом и тканевым чехлом	Не требует устранения
Нарастающий звук во время работы	Возможно, массажер используется длительное время	Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа
Внезапная остановка	Время массажа по умолчанию составляет 15 минут, после чего устройство самостоятельно отключается. Устройство оснащено системой защиты от перегрева	Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы запустить массажер Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа
Массажер не включается при нажатии кнопки	Устройство оснащено системой защиты от перегрева Отсоединился штекер кабеля питания или неплотно вставлена вилка в розетку	Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа Проверьте плотность соединения

Технические характеристики

Название	Офисное массажное кресло
Модель	MeWork
Блок питания	DC 12 В 3 А
Мощность	29 Вт
Время работы массажа	15 минут
Габариты	74x64x112 см (142x64x95 см)
Высота сиденья	41 - 51 см
Вес	18.8 кг
Длина кабеля	1.8 м
Внутреннее устройство	Стальная рама, поролон, тканевый чехол, массажный механизм

Импортер:
ИП Мотовилова Анна Николаевна
641104, Россия, Курганская область, м.о. Шумихинский, село Галкино, ул.Советская, 7А - 1



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

 **CERTIFIED**
ERGONOVA GERMANY